


# Návod k použití ElaNara

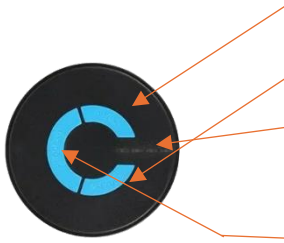

ON: Zapnutí

INC: Zvýšit intenzitu masáže

OFF: Vypnutí

DEC: Snížit intenzitu masáže

LED: Světelná signalizace

PROGRAM: Nastavení programu

## Kontrolky pro indikaci režimu:

- A – Svítí modře 1 kontrolka
- B – Svítí modře 2 kontrolka
- C – Svítí modře 1-2 kontrolka
- D – Svítí modře 3 kontrolka
- E – Svítí modře 4 kontrolka
- F – Svítí modře 3-4 kontrolka

## Druhy masáží:

- Akupunktura
- Hnětení
- Poklepávání
- Fyzioterapie
- Tepová masáž
- Lymfodrenáž

## Popis jednotlivých režimů:

**A – Akupunktura:** Pomáhá zmírnit bolest a zlepšit nervovou funkci.

**B – Hnětení:** Uvolňuje napětí ve svalech, zlepšuje oběh.

**C – Poklepávání:** Rychlé pulzy pronikají hluboko, ulevují od bolesti.

**D – Fyzioterapie:** Rehabilitační cvičení pro zlepšení pohyblivosti a snížení bolesti.

**E – Tepová masáž:** Stimulace krevního oběhu, zmírnění svalového napětí.

**F – Lymfodrenáž:** Zlepšuje lymfatický oběh, snižuje otoky a podporuje hojení.

## Kontrolky pro snížení a zvýšení intenzity masáže:

-Když stisknete tlačítko zapnutí a zvýšení intenzity lampa postupně zvětšuje intenzitu modrého světla.

-Když stisknete tlačítko vypnout a snížit intenzitu a lampa se postupně zmenšuje intenzitu modrého světla.

Tlačítko pro zapnutí a zvýšení intenzity vypnutí a snížení intenzita se dělí na 10 tříd

## Proces pro provoz zařízení:

1. Vyjměte zařízení z pouzdra.
2. Umístěte masážní náplasti na požadované oblasti těla.
3. Pro zapnutí napájení stiskněte tlačítko zapnutí ON/INC
4. Režim volby
5. Úprava výstupní úrovně
6. Pracovní doba je 15 minut. CYKLUS
7. Stiskněte spínač pro vypnutí OFF/DEC, dokud lampa nezhasne

## Opatření:

1. Hlavní místo znečištění na těle přístroje očistěte vlhkým hadříkem neutrálním čisticím prostředkem a znovu jej otřete suchým hadříkem
2. při skladování přístroje jej neuchovávejte při vysokých nebo nízkých teplotách nebo vlhkostí
3. nečistoty na náplasti ovlivní efekt použití

## Vlastnosti produktu:

1. Nízkofrekvenční léčba probíhá pomocí rytmu a jemného impulsu v nízkofrekvenční léčba je rytmem a měkkým impulsem nízká frekvence je speciální elektřina s pravidelným rytmem nebo zastavením podle vhodného výkonu a rychlosti na tělo nízkými frekvencemi které na těle udělají rytmus a třídí impulzy mě jako z nízké frekvence je stejná jako masážní efekt nebo tlak štípnutí a poklep lidskou rukou
2. Výběr ze 6 režimů
3. Volba 6 režimů s jednoduchým ovládáním
4. Automaticky se vypne po 15 minutách od zastavení, když zapomenete vypnout napájení ( ECO režim) – šetří baterii zařízení

## Parametry produktu:

Jméno výrobku	H-Q-185 Cool tech
Použití režimů	A-F (6 režimů)
Frekvence	1-100 Hz
Pracovní	15 minut (cyklus)
Výstup	Maximálně 9,8 mA